



AGELOC®  
**GALVANIC SPA™**  
Owner's Manual

# ageLOC Galvanic Spa

Navráťte svoj mladistvý vzhľad pomocou viditeľnej podpory pre vašu pokožku a vlasy do 5 minút.

ageLOC Galvanic Spa je prístroj osobnej starostlivosti, ktorý využíva galvanický prúd a pomáha viditeľne zlepšiť vzhľad pokožky a vlasov. Tento všestranný prístroj s vymeniteľnými prídavnými zariadeniami a jedinečnými produktmi, ktoré ho sprevádzajú, pomáha zlepšovať vzhľad jemných línii a vrások; rozžiari pokožku a viditeľne revitalizuje pleť; zlepšuje pomarančový vzhľad pokožky; podporuje objemné, lesklé a zdravo vyzerajúce vlasy.

## Skôr než začnete

Pred použitím prístroja ageLOC Galvanic Spa si, prosím, prečítajte nasledujúce inštrukcie:

**⚠ Upozornenie: Prístroj ageLOC Galvanic Spa používajte len na zdravú pokožku. Nepoužívajte, ak máte otvorené rany alebo sú vaše poranenia náchylné na rosaceu, ak máte alergiu na kov, problematickú pleť alebo precitlivenú pokožku. Pred použitím prístroja ageLOC Galvanic Spa sa poraďte s lekárom v prípade, ak ste tehotná, máte kardiostimulátor alebo podobný prístroj, ak máte epilepsiu, ak nosíte kovový zubný strojček, ak máte kovový implantát alebo v prípade choroby.**

**⚠** Noví používatelia ageLOC Galvanic Spa a tí, ktorí majú citlivú pokožku alebo pleť náchylnú na vznik akné, by vždy mali pred použitím produktu vykonať skúšku na malej ploche pokožky. Vždy skontroluje prístroj Galvanic Spa a nastavce pred ich použitím. Uistite sa, že sa tam nenachádzajú žiadne drsné alebo porušené plochy, ostré hrany ani bublinky. Ak zaznamenáte akékoľvek odchýlky, nástroj nepouží-

vajte a obráťte sa na miestnu pobočku Nu Skin®. Neprikladajte priamo na pery, oči ani očné viečka. Prístroj aj produkty sú len na vonkajšie použitie. Ak zaregistrujete akýkoľvek opuch, dlhodobé začervenanie alebo podráždenie pokožky, okamžite prerušte jeho používanie a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Prístroj je určený pre dospelých. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, a deti staršie ako 16 rokov, môžu používať prístroj pod dohľadom, alebo ak im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania prístroja a pochopili nebezpečenstvo s tým spojené. Je potrebné dohliadať na to, aby sa deti s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Uchovajte mimo dosahu detí.

- ⚠** Pred začatím používania prístroja odstráňte všetky plastové obaly. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote, pri minimálnej 4 °C, aby sa zabránilo možnej tvorbe plúzgerov.
- ⊘** Aby ste minimalizovali riziko šoku, popálenia, horenia alebo zranenia, prístroj neponárajte do vody. Neumiestňujte ho ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo by sa dal stiahnuť do vane, sprchy, umývadla či toalety. Nikdy neobsluhujte poškodený prístroj.
- ⊘** Pri odoberaní nestláčajte ani nedržte nastavce v strede, uvoľňovací mechanizmus by nemusel správne fungovať. Namiesto toho ho pridržte za bočné strany. Aby ste zabezpečili správnu likvidáciu prístroja ageLOC Galvanic Spa a batérií, likvidujte ich v súlade s platnými miestnymi zákonmi alebo požiadavkami na likvidáciu elektrických zariadení/batérií. Nesmie sa likvidovať ako bežný domový odpad.

# ageLOC Galvanic Spa obsahuje

- 1 návod na obsluhu
- 2 prístroj ageLOC Galvanic Spa
- 3 nadstavec na tvár ageLOC
- 4 nadstavec na ťažko dostupné miesta
- 5 nadstavec na telo
- 6 nadstavec na vlasovú pokožku
- 7 dve batérie typu AAA



# Dôležité informácie o údržbe a záruke



obrázok č. 1

## Čistenie prístroja a nastavcov:

Po dokončení galvanickej aplikácie odoberte nadstavec z prístroja a použitím vlhkej handričky odstráňte prebytočný produkt (obrázok č. 1). Prístroj dôkladne osušte a skladujte ho na suchom mieste s odpojeným nadstavcom.



obrázok č. 2

**Pokyny na výmenu batérií:** Ak sú slabé batérie, žltá ikona batérie sa zobrazí v strede displeja a prístroj dvakrát po sebe zapípa štyrikrát (obrázok č. 2). Ak sa tak stane, vložte dve nové batérie typu AAA.

Ak chcete vymeniť batérie, zatlačte tesne nad krytom priehradky batérie po oboch stranách a potiahnite silno nadol (obrázok č. 3). Kryt batérie odoberte z prístroja (obrázok č. 4).



obrázok č. 3

Následne zľahka potiahnite za prúžok a odstráňte staré batérie. Do priehradky medzi prúžok vložte dve nové batérie typu AAA. Nedodržanie umiestnenia stužky pod batériami môže spôsobiť prienik vody do prístroja, čím ho poškodí (obrázok č. 5).



obrázok č. 4



obrázok č. 5



obrázok č. 6

Nakoniec vložte kryt batérií pevne na miesto (obrázok č. 6).

Produkty osobnej starostlivosti vytvorené na použitie s prístrojom ageLOC Galvanic Spa sa predávajú samostatne.

Používajte 2 batérie typu AAA LR03 1,5 V. Nekombinujte nové a použité batérie ani batérie rôzneho typu, ako sú alkalické s nealkalickými či nabíjateľné s jednorazovými.

Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať zo zariadenia. Jednorazové batérie nie je možné nabíjať.

Batérie neskratujte. Ak sa kladný (+) a záporný (-) pól dostanú do kontaktu, batéria sa skratuje.

Vybité batérie sa musia z prístroja vybrať a bezpečne zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi. Pred dlhodobým uskladnením vyberte batérie z prístroja.

**Limitovaná 2-ročná záruka:** Spoločnosť Nu Skin zaručuje, že prístroj ageLOC Galvanic Spa bude bez chýb materiálu a výroby dva roky od dátumu, kedy vám bol doručený. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo nehody. Ak dôjde k chybe produktu v rámci dvojročnej záručnej doby, kontaktujte miestne podporné centrum spoločnosti Nu Skin, kde vám umožnía jeho výmenu alebo opravu. Môže byť potrebné predložiť oficiálny doklad o nákupe, na ktorom je uvedený dátum doručenia. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo preskúmať zariadenie. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva, ktoré sú špecifické pre krajinu zakúpenia. Tieto práva zostávajú chránené. Táto záruka platí v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Irsko, Izrael, Juhoafrická republika, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina.

Chránené americkými patentovými číslami 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 a mnohými medzinárodnými vydanými a doteraz prerokúvanými patentmi.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s produktom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohla spôsobiť nesprávna manipulácia s týmto produktom. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na službu likvidácie domového odpadu.



Označenie CE znamená, že výrobca skontroloval, či tento produkt spĺňa požiadavky EÚ týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia alebo životného prostredia. Označuje súlad produktu s právnymi predpismi EÚ a umožňuje voľný pohyb produktov na európskom trhu.




Označenie EAC (označenie zhody EurAsian) je označenie, ktoré musí byť umiestnené na produkte, aby sa preukázala zhoda s predpismi colnej únie.

## ageLOC Galvanic Spa obsahuje

- 1 snímač pripojenia nastavca
- 2 uvoľňovacie tlačidlo nastavca
- 3 displej
- 4 tlačidlo voľby
- 5 chrómový panel
- 6 priehradku batérie
- 7 ukazovateľ umiestnenia nastavca (malá vystupujúca značka)

**Poznámka:** Pred použitím vyberte ochranné plastové pásky z oboch strán prístroja.

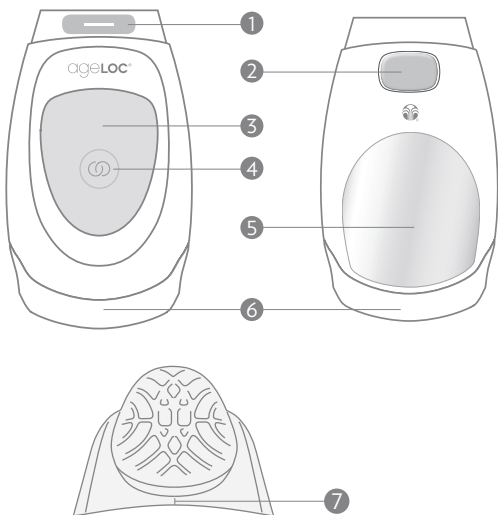


## Displej prístroja ageLOC Galvanic Spa

- 1 Čísla 1, 2, 3, 4 alebo 5 označujú číslo aplikácie a zodpovedajúci produkt (pozri nižšie).
- 2 Päť bodiek označuje zodpovedajúcu dĺžku aplikácie.
- 3 Ak sú slabé batérie, po každom zapnutí prístroja sa v spodnej časti displeja zobrazí žltý symbol batérie a prístroj zapípa. Ak sú batérie úplne vybité, v spodnej časti displeja sa zobrazí žltý symbol batérie a prístroj sa vypne.

Každý produkt sa musí používať so správnym číslom aplikácie:

<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">3</div>	<p>Prípravná fáza Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel s ageLOC</p> <p>Ošetrovanie Galvanic Spa Facial Treatment Gel s ageLOC</p> <p>Prípravok Tru Face® Line Corrector</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">5</div>	<p>Gél ageLOC Body Shaping Gel</p> <p>Sérum ageLOC Nutriol® Intensive Scalp &amp; Hair Serum</p>
--	--	---	--

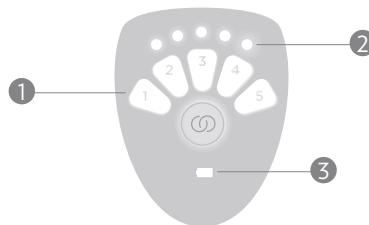

# Ako používať prístroj ageLOC Galvanic Spa

Prístroj ageLOC Galvanic Spa obsahuje rôzne nastavce na tvár, vlasovú pokožku a telo, ale všetky sa používajú podobne. Konkrétne inštrukcie pre jednotlivé použitie môžete nájsť na stranách 318 - 325. Pred prvým použitím prístroja si, prosím, prečítajte inštrukcie.

Pre každé použitie musíte na prístroj pripojiť správny nastavec. Obidva chrómové kontaktné body, ktoré sa dotýkajú pokožky musia byť vlhké, aby dokázali viesť galvanický prúd.



obrázok č. 1

**Pripojenie nastavca:** Prístroj držte displejom smerom k sebe. Nasmerujte ukazovateľ umiestnenia nastavca k prednej časti prístroja, potom nastavec pevne zatlačte za strany, až kým nezacvakne na mieste (obrázok č. 1). Ak sa nastavec nepripojí, uistite sa, že je otočený správnym smerom a je správne umiestnený. Netlačte na nastavec, môžete ho zničiť. Prístroj ageLOC Galvanic Spa nebude fungovať, ak nie je hlavica nastavca, pevne pripojená.



obrázok č. 2

**Odobratie nastavca:** Najprv otočte prístroj chrómovým panelom smerom k sebe. Voľnou rukou uchopte nastavec po stranách a pevne zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo (obrázok č. 2). Zľahka potiahnite nastavec za bočné strany preč od prístroja.

**Svetlá na displeji:** Displej zostane rozsvietený počas zapnutia prístroja, pri výbere aj počas aplikácie. Ak displej bliká, je to z dôvodu, že prístroj stratil kontakt s pokožkou alebo pokožka nie je dost' navlhčená, aby mohla viesť prúd.

**Nanesenie produktu:** Naneste odporúčané množstvo produktu na určené miesto na tvári, vlasovej pokožke alebo tele.

**Voľba aplikácie:** Stláčajte tlačidlo voľby, až kým sa na displeji nerozsvieti požadované číslo (obrázok č. 3).



obrázok č. 3

**Aktivácia galvanického prúdu:** Vaše prsty sa musia dotýkať chrómového panela na zadnej strane prístroja, zatiaľ čo sa nastavec dotýka pokožky. Odporúčame dôkladne namočiť ruky vodou alebo prípravkom NaPCA Moisture Mist pre zlepšenie vodivosti.\* Ak vám prsty sklznu z chrómového panela počas jeho používania, nemajte obavy – napravte si držanie prístroja a pokračujte v procedúre.

\* Zapamätajte si, že pokožka dotýkajúca sa obidvoch chrómových kontaktných bodov musí byť navlhčená, aby dokázala viesť galvanický prúd.

**Počas aplikácie:** Prístroj zapípa každých 10 sekúnd, čím oznámi, že zariadenie je zapnuté a pracuje. Ak zostáva aplikácii 30 sekúnd, prístroj bude pípať každých päť sekúnd až do dokončenia aplikácie.

**Prerušenie aplikácie:** Nastavec musíte udržiavať v kontakte s určeným miestom a všetky kontaktné body udržiajte vlhké (obrázok č. 4). Ak prerušíte kontakt s chrómovým panelom alebo s hlavicou aplikácie, displej zablíká. Prístroj sa po niekoľkých minútach nečinnosti vypne.



obrázok č. 4

**Dokončenie aplikácie:** Na konci procedúry vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Ak budete chcieť vykonať ďalšiu aplikáciu, stlačte tlačidlo voľby a prejdite na číslo ďalšej aplikácie. Pre vypnutie prístroja v ktorejkoľvek fáze jednoducho stláčajte tlačidlo voľby, kým sa displej nevypne.

Prerušte používanie prístroja, ak zaznamenáte svrbenie, začervenanie alebo podráždenie pokožky.

# Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Nastavenie prípravného ošetrovania	Nastavenie ošetrovania	Nadstavec
		

Vykonaťvajte túto procedúru trikrát týždenne na dosiahnutie viditeľne revitalizačných a osviežujúcich výsledkov.



obrázok č. 1

**Príprava:** Začnite použitím čistiaceho prostriedku od Nu Skin® podľa vlastného výberu. K prístroju pripojte nastavpec na tvár ageLOC (obrázok č. 1).



PRE-TREAT GEL

## FÁZA S GÉLOM PRE-TREAT GEL

**1. KROK:** Rovnomerne naneste celý obsah ampulky gélu ageLOC Pre-Treat Gel na celú oblasť tváre a krku, pričom sa vyhňte očiam, očným viečkam a perám.

**2. KROK:** Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 1 (obrázok č. 2). Táto aplikácia bude trvať 2 minúty.

**3. KROK:** Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite kĺzať hlavnicou nastavca po pokožke (obrázok č. 3). Dbajte na to, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam, ako sú oči, očné viečka a pery.



obrázok č. 3

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

**4. KROK:** Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Z tváre a prístroja zotrite zvyšný gél vlhkým uterákom (obrázok č. 4). Teraz je čas na fázu s gélom Treat Gel.



obrázok č. 4

## FÁZA S GÉLOM TREATMENT GEL



TREATMENT GEL

**1. KROK:** Naneste celý obsah ampulky gélu ageLOC Treatment Gel na tvár a krk.

**2. KROK:** Nadstavec na tvár ageLOC by už mal byť pripojený, takže stlačte tlačidlo voľby raz pre zapnutie prístroja a stláčajte ďalej, až kým nezvolíte číslo 2 (obrázok č. 5). Táto aplikácia bude trvať 3 minúty.

**3. KROK:** Prístroj opäť držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite kĺzať hlavnicou nastavca po pokožke (obrázok č. 6). Dbajte na to, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam ako sú oči, očné viečka a pery.



obrázok č. 5

Prístroj automaticky zapípa jeden, dva alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.



obrázok č. 6

**4. KROK:** Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Použitím vlhkeho uteráka zotrite z tváre a prístroja zvyšný gél (obrázok č. 7).



obrázok č. 7

# Prípravok Tru Face Line Corrector



Vykonávajte túto procedúru ráno a večer a zamierte na zjemnenie vzhľadu jemných línií a vrások okolo úst, očí a na čele.



obrázok č. 1

**Príprava:** Začnite použitím čistiaceho prostriedku a tonika od Nu Skin podľa vlastného výberu. K prístroju pripojte nadstavec na ťažko dostupné miesta (obrázok č. 1).

**1. KROK:** Naneste prípravok Tru Face Line Corrector na línie a vrásky, na ktoré sa chcete zamerať. Naneste naraz len na jednu z týchto oblastí. Dbajte na to, aby ste na povrchu pokožky nechali tenkú vrstvu produktu.

**2. KROK:** Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 3 (obrázok č. 2). Táto aplikácia bude trvať 5 minút.

**Tip od profesionálov:** Ak sa zameriavate na viacero oblastí, päť minút môžete využiť na viac než jednu oblasť. Malé oblasti aplikácie zvyčajne nevyžadujú viac než minútu či dve.


**3. KROK:** Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite kĺzať hlavnicou nadstavca po pokožke (obrázok č. 3). Dávajte pozor, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam, ako sú oči, očné viečka a pery.



obrázok č. 3

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

**4. KROK:** Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Opakujte kroky 1 až 3 pre každú oblasť zamerania. Po dokončení všetkých aplikácií votrite zostávajúci produkt do pokožky a zvyšný produkt z prístroja zotrite vlhkým uterákom (obrázok č. 4).

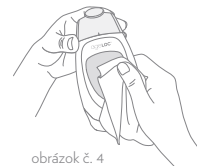

obrázok č. 4



# Gél ageLOC Body Shaping Gel

Nastavenie	Nadstavec
	

Vykonávajte túto aplikáciu trikrát týždenne pre viditeľné vytvarovanie, spevnenie a vyhladenie pokožky na ramenách, stehnách, bruchu a zadku.



obrázok č. 1

**Príprava:** K prístroju pripojte nadstavec na telo (obrázok č. 1).

**1. KROK:** Používajte na očistenú pokožku. Dostatočné množstvo gélu ageLOC Body Shaping Gel naneste na požadovanú oblasť.

**2. KROK:** Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 4 (obrázok č. 2). Táto aplikácia bude trvať 5 minút na jednu oblasť.

**Tip od profesionálov:** 5 minút je odporúčaná doba aplikácie na jednu oblasť, ale možno na to nebude potrebných celých 5 minút.

**3. KROK:** Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite kĺzať hlavnicou nadstavca po pokožke (obrázok č. 3).

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.




obrázok č. 2



obrázok č. 3

**4. KROK:** Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Opakujte kroky 1 až 3 pre každú oblasť zamerania. Po vykonaní všetkých aplikácií odstráňte zvyšný produkt z pokožky a z prístroja vlhkým uterákom (obrázok č. 4).

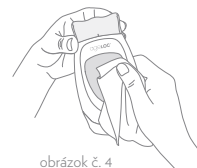

obrázok č. 4

Naneste prípravok ageLOC Dermatic Effects® dvakrát denne pre udržanie viditeľného vyhladenia a tvarovania pokožky. Počas dní, keď aplikujete gél ageLOC Body Shaping Gel, naneste prípravok ageLOC Dermatic Effects až po galvanickej aplikácii.

# Sérum ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum



Vykonať tento rituál bez námahy ráno a večer pre postupnú revitalizáciu vlasovej pokožky a vaše vlasy budú pôsobiť a vyzeráť božsky.



obrázok č. 1

**Príprava:** Používajte na uterákom osušené alebo suché vlasy. K prístroju pripojte nadstavec na vlasovú pokožku (obrázok č. 1).

**1. KROK:** Nastriekajte sérum ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum priamo na vlasovú pokožku a korenienky tak, že vlasy oddelíte (obrázok č. 2).

**Tip od profesionálov:** Ak ešte pred nanesením séra ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum zľahka postriekate suché vlasy vodou, budete môcť ľahšie upravovať vlasy počas aplikácie.

**2. KROK:** Prstami jemne vmasírujte sérum do vlasovej pokožky a korení (obrázok č. 3). Prípadné neposlušné pramene vyčesajte hrebeňom (obrázok č. 4).

Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nezozsvieti číslo 5 (obrázok č. 5). Táto aplikácia bude trvať 2 minúty.



obrázok č. 3



obrázok č. 4



obrázok č. 5

**3. KROK:** Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzhodu dotýkate chrómovej platničky. Nadstavec priložte priamo k vlasovej pokožke a pohybujte z prednej časti vlasovej línie smerom dozadu a zároveň udržiavajte neustály kontakt s vlasovou pokožkou (obrázok č. 6).



obrázok č. 6

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

**Poznámka:** Počas galvanickej aplikácie udržiavajte stály kontakt nadstavca s vlasovou pokožkou

**4. KROK:** Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne.

Vlasy neoplachujte. Upravte ich ako zvyčajne a z prístroja odstráňte zvyšný produkt vlhkým uterákom (obrázok č. 7).



obrázok č. 7



**NSE Products Europe BVBA, Da Vincilaan, 9 – 1935, Zaventem, Belgium**

**Imported by/Импортер/Импортер/ מיובא על ידי:**

- RU** ООО "Ню Скин Энтерпрайзиз РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.
- IL** Nu Skin Israel Inc. Omarim Street 11, Bldg Menivim, Industrial Park, Omer 8496500

©2019 NSE Products, Inc

[www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)

94510891/1